



**Monconi
Conici
Angolati
Zimmer®**

SCOPRI LA LIBERTÀ DI SCELTA.

I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono di scegliere il miglior protocollo implantare per i propri pazienti.

1 Resistenza e durabilità

- I Monconi Conici Zimmer Angolati a 30° sono **più resistenti del 25% rispetto ai monconi Multi-unit Nobel Biocare® angolati a 30° nei test di resistenza alla fatica e mostrano una robustezza di oltre l'80% maggiore nei test di resistenza alla compressione.**^{1,2}
- La vite di ritenzione protesica Zimmer ha dimostrato di trattenere oltre il **50% di torque in più rispetto alle viti di ritenzione protesiche Nobel Biocare** in test di ritenzione dinamica.² In letteratura è stato riportato che la perdita di torque (precaricato) è la causa maggiore di allentamento della vite.^{3,4}

2 Compatibilità

- I Monconi Conici Angolati Zimmer sfruttano la medesima piattaforma protesica dei Monconi Conici, **pertanto non vi è alcuna necessità di familiarizzare con nuove tecniche di restauro.**
- I componenti di restauro intercambiabili **riducono al minimo i controlli delle scorte e la necessità di rifornimento per lo studio professionale.**

3 Facilità d'uso

- Lo strumento portamoncone viene fornito premontato ed è progettato **per agevolare il facile rilascio e posizionamento dei monconi.**
- Lo strumento portamoncone a basso profilo ne **consente l'uso nei casi di spazio interocclusale limitato.**




zimmer | dental

POSSIBILITÀ DI INSERIRE IMPIANTI FUORI ASSE CON AMPLIAMENTO DELLE OPZIONI CHIRURGICHE

I Monconi Conici Angolati Zimmer consentono di **impiegare protocolli chirurgici che prevedono l'inserimento di impianti fuori asse**, in modo da:

- Sfruttare al massimo l'osso disponibile
- Evitare il nervo alveolare e il seno mascellare
- Ridurre al minimo la lunghezza dell'estremità in estensione della protesi

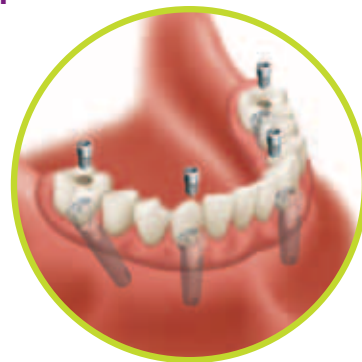

PANORAMICA SUL NUOVO MONCONE CONICO ANGOLATO ZIMMER



- Fornisce la correzione dell'angolazione per l'inserimento di impianti fuori asse
 - **Moncone Conico Angolato 15°**: corregge divergenze fino a 30°
 - **Moncone Conico Angolato 30°**: corregge divergenze fino a 45°
- **L'inclinazione a 15° del cono** consente di eseguire un'ulteriore correzione dell'angolazione di 15°
- **Il cono a basso profilo** da 1,2 mm ne consente l'utilizzo nei casi di spazio interocclusale limitato
- **Il design angolato** ricolloca la piattaforma protesica per migliorare l'accesso alla vite protesica e facilitare il tragitto di inserzione della protesi
- **La cuffia disponibile in varie altezze** consente una selezione maggiormente personalizzata basata sulle dimensioni del tessuto molle del paziente

Moncone Conico Angolato 15° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)

Codice articolo	15AT312	15AT323	15AT334	15AT412	15AT423	15AT434
Piattaforma implantare	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm
Altezza cuffia (a/b)	1 mm/2 mm	2 mm/3 mm	3 mm/4 mm	1 mm/2 mm	2 mm/3 mm	3 mm/4 mm

Moncone Conico Angolato 30° (inclusa vite di ritenzione preassemblata)

Codice articolo	30AT324	30AT335	30AT346	30AT424	30AT435	30AT446
Piattaforma implantare	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø3,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm	Ø4,5 mm
Altezza cuffia (a/b)	2 mm/4 mm	3 mm/5 mm	4 mm/6 mm	2 mm/4 mm	3 mm/5 mm	4 mm/6 mm



¹I test di resistenza e fatica sono stati eseguiti in conformità allo standard ISO 14801. Dati archiviati.

²Maggay A. Zimmer® Angled Tapered Abutments, restorative solutions for tilted implant protocols. Dati archiviati..

³Winkler S, Ring K, Ring JD, Boberick KG. Implant screw mechanics and the settling effect: an overview. *J Oral Implantol.* 2003;34:242-245.

⁴Vogel RE, Davliakos JP. Spline™ implant prospective multicenter study: interim report on prosthetic screw stability in partially edentulous patients. *J Esthet Restor Dent.* 2002;14:225-237.

Per maggiori informazioni su questo prodotto, visitate il sito web www.zimmerdental.com o rivolgetevi a:

Per ricevere le nostre eNews visitateci all'indirizzo http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, materiali rigenerativi e opportunità educative, contattateci:

Negli USA 1 (800) 854-7019
Per ordini via fax 1 (888) 225-2483
Al di fuori degli USA +1 (760) 929-4300
Australia +61 (0)2 9950 5434 oppure 1 (800) 241 916
Canada + 1 (905) 567-2073 oppure 1 (800) 265-0968
Cina + 86 21 2211

Francia +33 (0)1 45 12 35 35
Germania +49 (0)761 1 56 47 0
Israele +972 (0)3 6124242
Italia +(39) 0438 555573
Spagna +34 93 846 05 43



Zimmer Dental Italy
Via Matteotti 98
31029 Vittorio Veneto
ITALIA

www.zimmerdental.com
www.zimmerdental.it